



HRP Conjugated Anti His-Tag Mouse Monoclonal Antibody

抗His标签鼠单克隆抗体，HRP

目录号：CW0285M (100 μ l)

保存条件：-20 $^{\circ}$ C

产品内容

Catalog no.	CW0285M
Volume	100 μ l

抗体类型 亲和纯化鼠单克隆抗体IgG
抗体浓度 1 mg/ml
免疫原 人工合成(His)6多肽
标记物 Horseradish Peroxidase (HRP)

产品简介

本抗体为辣根过氧化物酶 (HRP) 直接标记的抗His标签鼠单克隆抗体, 可高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的六个连续组氨酸标签, 而不受邻近氨基酸组成的影响, 可用于检测His-Tag融合蛋白。本产品无需使用二抗, 可直接用相应酶底物显色或化学发光法检测目的蛋白, 减化了实验步骤, 避免由二抗交叉反应引起的非特异性条带。


应用范围

Western Blot	1: 500-3,000
ELISA	1: 1,000-20,000

注意事项

1. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗;
2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例

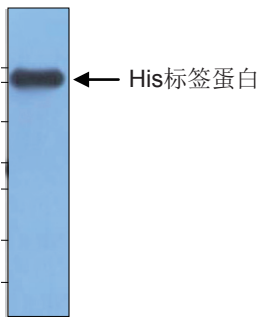

HRP标记的抗His鼠单克隆抗体检测融合表达
His-Tag蛋白 (74kD) 全菌裂解液Western Blot结果

本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其它用途